

---

S3C Многофункциональное устройство ( OPT + SHR+Вакуум+ биполярный RF) для удаления волос, омоложения кожи, лечения сосудистых поражений и акне, уменьшения морщин и отбеливания кожи

**HONKON**  
Science Creates Beauty



**HONKON**  
Science Creates Beauty



**HONKON**  
Science Creates Beauty



**HONKON**  
Science Creates Beauty



S3C Многофункциональное устройство ( OPT + SHR+Вакуум+ биполярный

RF) для удаления волос, омоложения кожи, лечения сосудистых поражений и акне, уменьшения морщин и отбеливания кожи

# OPT(IPL)

Удаление Волос Омоложение Кожи

Удаление Волос Всасывания

S3C



- ✓ Технология OPT, обеспечивает стабильный выход энергии для каждого импульса
- ✓ Технология всасывания помогает улучшить клинический результат
- ✓ Дружественный интерфейс, простой в эксплуатации
- ✓ фильтров с различными функциями удовлетворяют различным потребностям

---


S3C Многофункциональное устройство использует технологию OPT (Оптимальная импульсная технология)

Каждый свет из обычного IPL имеет первый пик энергии импульса ,который работает на месте пересечения дермиса и эпидермиса, в котором собирает многие меланины и сосуды,и в тоже время имеет многие нервы,когда меланины и сосуды поглотили энергии в пером импульсе ,и зарождение большие количества теплоты,которые стимулирует нервные окончания и причинит боль. И в тоже времени уменьшает энергии каждого света из IPL, кроме первого импульса дргие импульсы почти без эффекта лечения.

OPT устройство решает проблемы снижения энергии из обычного IPL и уменьшает первый пик энергии импульса, одинаковые энергии в каждом импульсах, мы будем чувствовать себя менее болезненным, а эффект лучше, чем обычный IPL, и сократили процедуры.


# Принцип лечения

S3C использует технологию всасывания OPT и режим двойной безопасности в сочетании с применением принципа селективного света и тепла IPL, которые усиливают эффект омоложения, удаление веснушек и волос и удаление волос, а также восстановление кожи и удаление волос без видимых болей и побочных эффектов во время лечения. Веди инструмент E-light в более безопасный, эффективный и более безболезненный век.

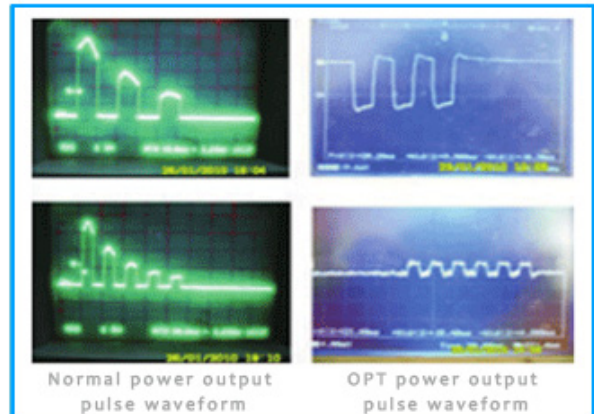

## Общий E-light

Обычное электронное освещение может рассеиваться и образовывать большое количество тепла на эпидермисе и кожном сосочке. Эпидермис легко повредить.

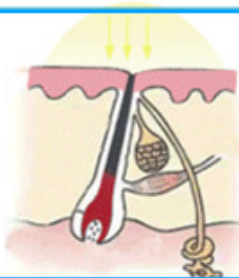

## S3C

S3C может образовывать мало тепла на эпидермисе и кожном сосочке, теплового повреждения эпидермиса можно эффективно избежать.

Применения:

1. Удаление волос
2. Удаление прыщей и акне
3. Уменьшение морщин
4. Отбеливание кожи

---

5. Лечение сосудистых поражений

6. Омоложение кожи.

7. Лечение пигментных поражений в эпидермисе

# Применение

## Удаление волос

Идеальная технология пульса удаляет волосы всего тела

## Омоложение кожи

Улучшение кожи мелких пор, повышение эластичности кожи

## Пигментные поражения


Веснушки, пигментация после пятнистого воспаления

## Удаление прыщей


Эффективное улучшение пропионибактериальных угрей и решение проблем с угрями

## Сосудистые поражения

Гемангиома портвейн пятна на лице или покраснение груди простой телеангиэктазия

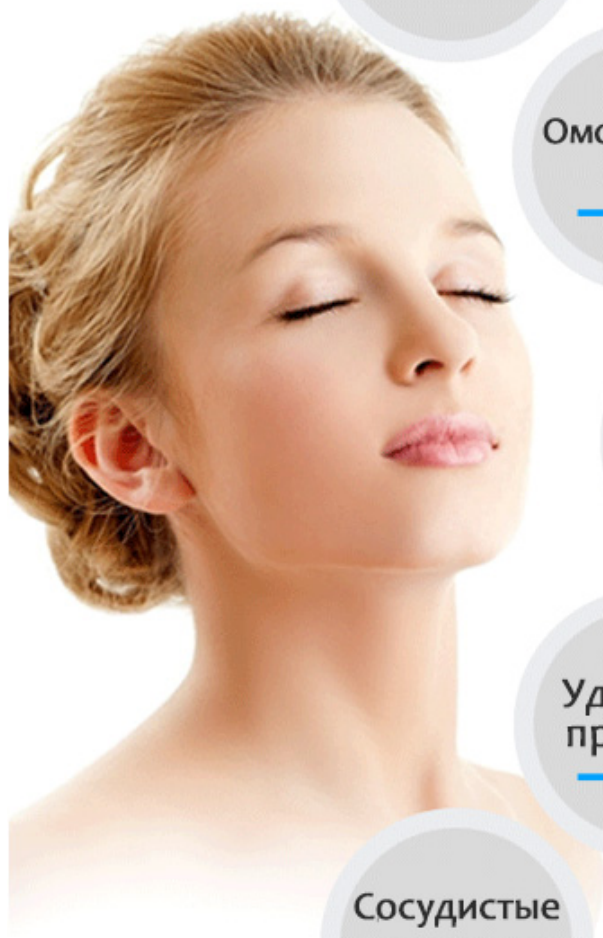

## Показать подробности

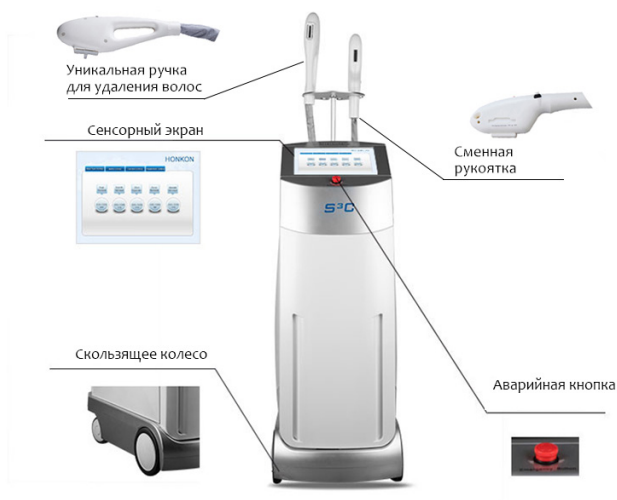

### Уникальная ручка для удаления волос

Размер пятна 8mm\*40mm

Уникальная присоска собирает энергию в ткани-мишени, уменьшает боль при лечении, сокращает время лечения.



### Фильтровальная рукоятка

Размер пятна 8mm\*40mm

Фильтр можно свободно переключать на прыщи, омоложение кожи, пигментацию, удаление сосудов и волос ...



Фильтр сменная ручка с пятью фильтрами



**Омоложение кожи**  
530-1200nm

Улучшить текстуру кожи, нежные поры и омоложение кожи



**Сосудистые поражения**  
585-1200nm

Лечить покраснение лица, чувствительную кожу и сосудистые поражения



**Удаление волос**  
610-1200nm

Навсегда удалить волосы на теле



**Пигментные поражения**  
560-1200nm

Пигментные поражения (пятна), пятнистый себорейный кератоз  
Удаление прыщей



**Удаление прыщей**  
430-1200nm

Эффективное улучшение пропионибактериальных угрей и решение угрей и решение проблем угрей

---

## Особенности и преимущества

1. Инновационная технология ОРТ обеспечивает стабильный выход энергии каждого импульса и приносит безопасный и безболезненный и эффективный результат клиентам.
2. Уникальная вакуумная технология, обеспечивающая более эффективный клинический результат. Вакуум всасывает обрабатываемый участок кожи, что дает более эффективную доставку энергии клеткам мишеням, и снижает поглощение энергии окружающими тканями, что снижает болезненность и улучшает результат от процедур.
3. Разумный интерфейс очень удобно для мастера.
4. Две ручки и гибкая комбинация обеспечивают наиболее эффективное лечение.
5. В режиме SHR частота 1-10 Гц обеспечивает быстро лечить.

## Преимущества

### Безопаснее



Отсос энергии ОРТ для эпидермиса значительно улучшает лечебный эффект и становится более безопасным по сравнению с обычным ОРТ.

### Более эффективно




Уникальная функция всасывания собирает энергию в ткани-мишени, значительно сокращает время лечения по сравнению с обычным лечением электронным светом.

### Быстрее



Более быстрый слайд-режим значительно повышает эффективность и быстрее удаляет волосы

### Более удобный

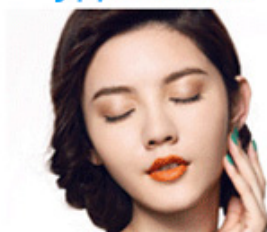

Эпидермальный уменьшить поглощение света сделал меньше боли, функция всасывающего массажа повышает комфортность лечения.

### Более всеобъемлющий



С наименьшей в мире ручкой размера пятна обеспечьте различные зоны обработки и высокую плотность энергии.

---

Product link : <https://ru.honkonglobal.com/s3c-2.html>