
S7C Многофункциональное устройство (OPT + SHR+Вакуум+ биполярный RF) для удаления волос, омоложения кожи, лечения сосудистых поражений и акне, уменьшения морщин и отбеливания кожи

HONKON
Science Creates Beauty



HONKON
Science Creates Beauty



HONKON
Science Creates Beauty



HONKON
Science Creates Beauty



HONKON
Science Creates Beauty



HONKON
Science Creates Beauty



HONKON
Science Creates Beauty



S7C Многофункциональное устройство (OPT + SHR+Вакуум+ биполярный RF) для удаления волос, омоложения кожи, лечения сосудистых поражений и

акне, уменьшения морщин и
отбеливания кожи.

4 В Одном

Многофункциональный OPT (IPL)

Удаление Волос

Омоложение Кожи

S7C



- ✓ Передовые и инновационные технологии OPT
- ✓ Частота SHR 1-10Hz
- ✓ 4 различные ручки обработки & 5 сменных фильтров
- ✓ Гибкая комбинация, принесите наиболее эффективное лечение


S7C Многофункциональное устройство использует технологию OPT (Оптимальная импульсная технология)

Каждый свет из обычного IPL имеет первый пик энергии импульса ,который работает на месте пересечения дермиса и эпидермиса, в котором собирает многие меланины и сосуды,и в тоже время имеет многие нервы,когда меланины и сосуды поглотили энергии в пером импульсе ,и зарождение большие количества теплоты,которые стимулирует нервные окончания и причинит боль. И в тоже времени уменьшает энергии каждого света из IPL, кроме первого импульса дргие импульсы почти без эффекта лечения.

OPT устройство решает проблемы снижения энергии из обычного IPL и уменьшает первый пик энергии импульса, одинаковые энергии в каждом импульсах, мы будем чувствовать себя менее болезненным, а эффект лучше, чем обычный IPL, и сократили процедуры.

Принцип лечения

S7C использует технологию всасывания ОРТ и режим двойной безопасности в сочетании с применением принципа селективного света и тепла IPL, которые усиливают эффект омоложения, удаление веснушек и волос и удаление волос, а также восстановление кожи и удаление волос без видимых болей и побочных эффектов во время лечения. Веди инструмент E-light в более безопасный, эффективный и более безболезненный век.

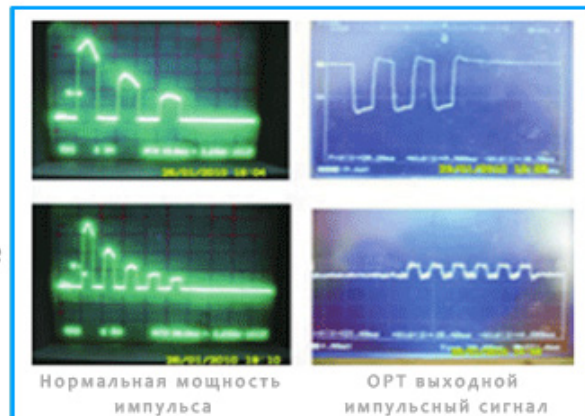

Общий E-light

Обычное электронное освещение может рассеиваться и образовывать большое количество тепла на эпидермисе и кожном сосочке. Эпидермис легко повредить.



S7C

S7C может образовывать мало тепла на эпидермисе и кожном сосочке, теплового повреждения эпидермиса можно эффективно избежать.

Применения:

1. Удаление волос
2. Удаление прыщей и акне
3. Уменьшение морщин
4. Отбеливание кожи
5. Лечение сосудистых поражений
6. Омоложение кожи.
7. Лечение пигментных поражений в эпидермисе

Filter changeable handle with five filters



Skin rejuvenation 530-1200nm

Improve the skin texture,
delicate pores and skin
rejuvenation



Vascular lesions 585-1200nm

Treat facial flushing, sensitive
skin and vascular lesions



Hair removal 610-1200nm

Permanent remove body hair



Pigment lesions 560-1200nm

Pigment lesions(sunspots),
spot-like
Seborrheic Keratosis



Acne removal 430-1200nm

Effectively improving of Pro-
pionibacterium acnes and
solving acne problems

Особенности и преимущества

1. Инновационная технология ОРТ обеспечивает стабильный выход энергии каждого импульса и приносит безопасный и безболезненный и эффективный результат клиентам.
2. Уникальная вакуумная технология, обеспечивающая более эффективный клинический результат. Вакуум всасывает обрабатываемый участок кожи, что дает более эффективную доставку энергии клеткам мишеням, и снижает поглощение энергии окружающими тканями, что снижает болезненность и улучшает результат от процедур.
3. Разумный интерфейс очень удобно для мастера.
4. Большой размер пятна 15мм * 60мм обеспечивает быстрое лечение.
5. Наименьший размер пятна 10мм * 10мм обеспечивает легкое лечение для любых локализованных областей.
6. Четыре ручки и гибкая комбинация обеспечивают наиболее эффективное лечение.
7. В режиме SHR частота 1-10 Гц обеспечивает быстро лечить.

Advantages

Safer



The suction of OPT energy for epidermis improve the treatment effect significantly and become safer compared with ordinary OPT .

More effective



Unique suction function gather the energy into the target tissue, reduce the treatment times significantly compared with the common e-light treatment.

Faster



Faster, slide mode improve efficiency greatly and remove hair more quickly

More comfortable



Epidermal reduce the suction of light made less pain, suction massage function increase the comfort of the treatment.

More comprehensive



With the smallest spot size(10mm*10mm) handle in the world, ensure different treatment areas and high energy density.

Specification

Model name	S7C	RF energy	5-50W
Filter wavelength	HR 610-1200nm, PR 560-1200nm SR 530-1200nm, AR 430-1200nm, VR 585-1200nm	RF time	1-4s
Energy density	10-50J/cm ²	RF interval	2-4s
Spot size	8mm*40mm/15mm*60mm 10mm*10mm	RF frequency	2.64MHz
1st-pulse width Sub-pulse width	0.1-10ms	Cooling mode	Air + water + semi-conductor cooling
1st pulse interval Sub-pulse interval	0.1-10ms	Gross weight	60kg
Pulse number	1-5T	Package dimension	78*50.5*142cm ³
Frequency (SHR mode)	1-10Hz	Power supply	AC110/220V±10% 50Hz-60Hz

Product link : <https://ru.honkonglobal.com/s7c-2.html>